


Zur perfekten Akzentuierung von
ungesintertem Zirkonoxid

For perfect accentuation of unsintered zirconia

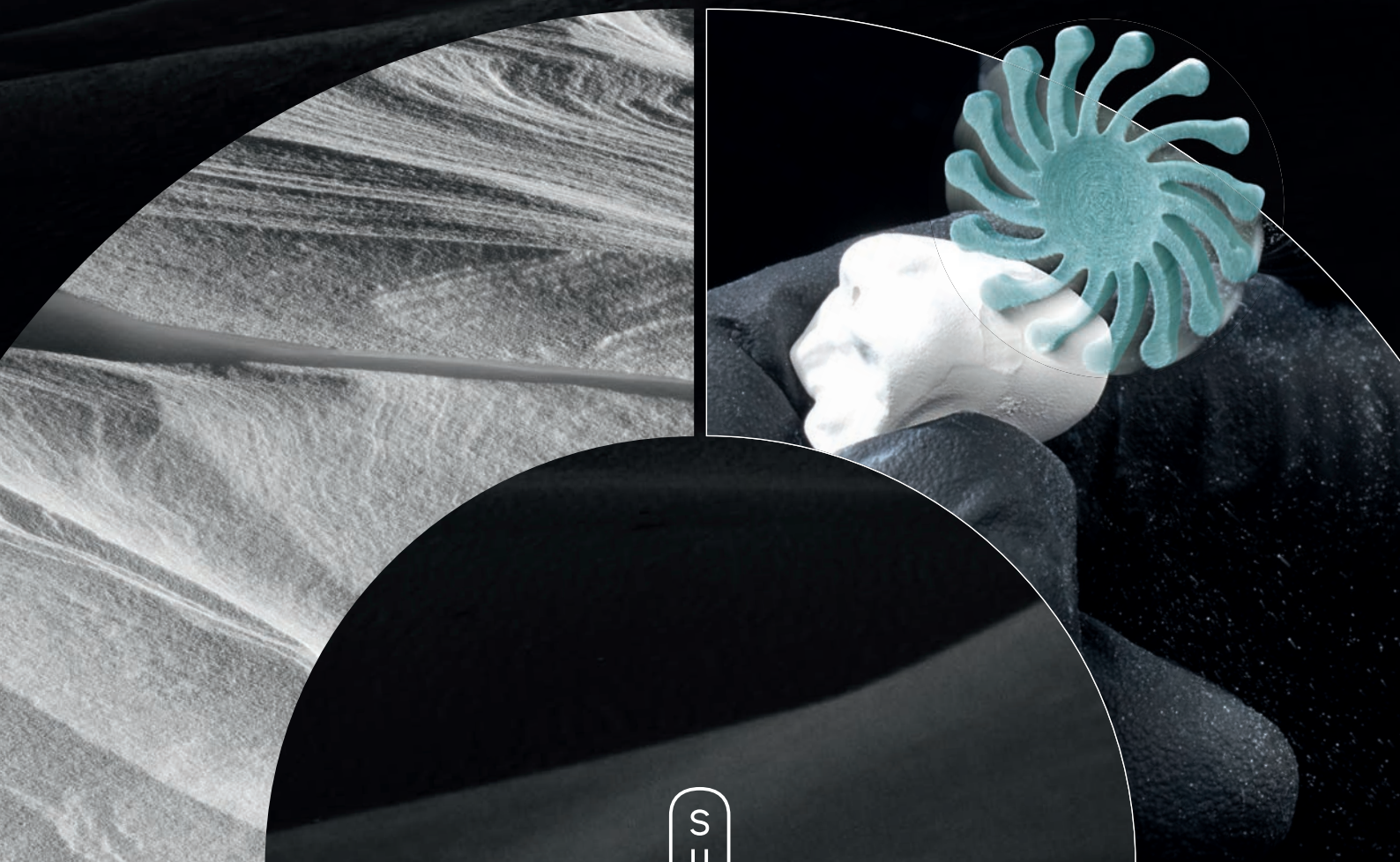

S
U
N

Exactly yours

Panther Green

Perfekte Grünlings-Akzentuierung.


Perfect green-body accentuation.

Perfekte Akzentuierung für Zirkonoxid im vorgesinterten Zustand

Die Bearbeitung von Zirkonoxid im Grünlingszustand ist seit vielen Jahren ein festgelegter Bearbeitungsschritt in der erfolgreichen Verwendung des Werkstoffes. Hierbei ist größte Sorgfalt geboten, denn die CAD/CAM gefräste Struktur hat eine geringe Härte und ist bei unsachgemäßer Bearbeitung unwiederbringlich beschädigt. Verunreinigungen jeglicher Art wie Handfett, falsche rotierende Instrumente sowie Schmutz beeinflussen die Materialeigenschaften enorm. Mit den neuen Panther Green Instrumenten nutzen Sie speziell abgestimmte Instrumente, mit denen die Bearbeitung sicher, präzise und effizient jeden Tag verlässlich durchgeführt werden kann. So wie sie es von Panther Instrumenten gewohnt sind.

Perfect accentuation for pre-sintered zirconia

Contouring zirconia in the green-body state is an important step in perfecting the application of the material. This step requires meticulous care because the CAD/CAM-milled structures have a low hardness and can be irreparably damaged if not machined properly. Impurities of any kind, such as hand grease, improperly selected rotating instruments or general dirt, can have an enormous influence on the properties of the material. With the new Panther Green instruments, you are using specially matched instruments that you can rely on to perform safe, accurate and efficient machining every day. Just what you've come to expect from Panther instruments.

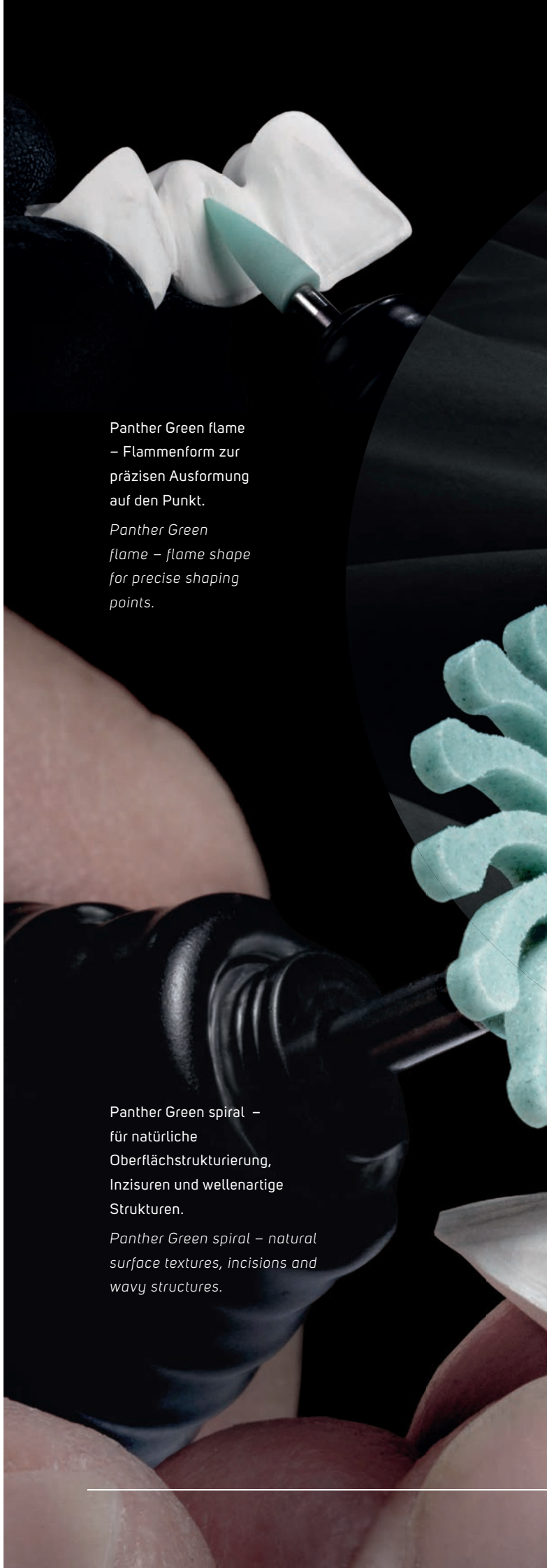

Panther Green flame
– Flammenform zur
präzisen Ausformung
auf den Punkt.

*Panther Green
flame – flame shape
for precise shaping
points.*

Panther Green spiral –
für natürliche
Oberflächenstrukturierung,
Inzisuren und wellenartige
Strukturen.

*Panther Green spiral – natural
surface textures, incisures and
wavy structures.*

Panther Green disc –
zur schonenden
Separierung von
Interdentalbereichen.

*Panther Green disc –
gentle separation of
interdental areas.*





VORTEILE BENEFITS




Kontrollierter Abtrag und exaktes Konturieren
Controlled removal and accurate contouring

Optimale Rauigkeit für beste Zirkonoxidbrillanz
Optimal roughness for maximum zirconia brilliance



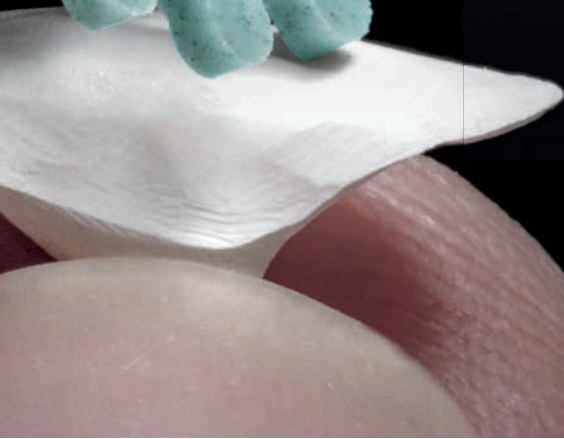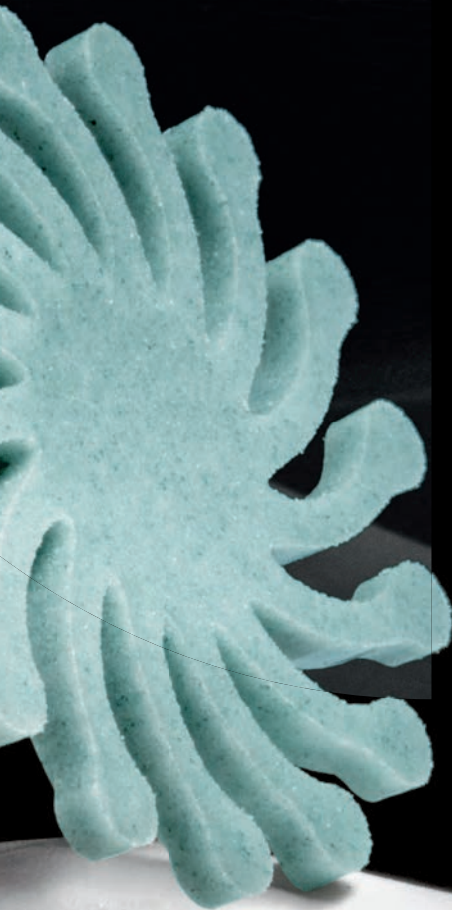

Ready to use Technologie
Ready-to-use technology

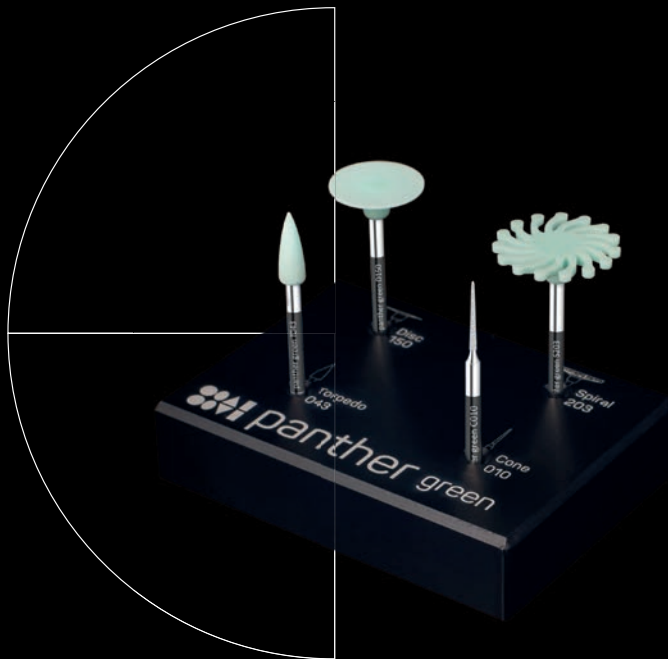






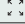
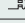

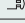
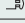
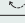
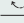








Panther Green



PGS SET 104 / 01
Panther Green Kit # 13

-  **Maße** Sizes (mm)
-  **Schaft** Shank
-  **optimal**/maximal (1/min)
-  **Packungsgrößen** Package sizes

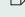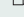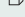Panther Green C010		Panther Green T043		Panther Green D150		Panther Green S203	
							
REF	PGS 600 104 M	REF	PGS 106 104 M	REF	PGS 146 104 M	REF	PGS 546 104 M
	∅ 1,1 × 11		∅ 4,3 × 12		∅ 15 × 0,3		∅ 20,3 × 1,2
	104-HP		104-HP		104-HP		104-HP
	25.000/40.000		6.000/20.000		6.000/20.000		6.000/20.000
	1,3		1,3		1,3		1,3



SUN Oberflächentechnik GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12, 75248 Ölbronn-Dürrn, Germany
 phone: +49 7237 48633-0 / fax: +49 7237 48633-20
 info@sungmbh.de / www.sun-dental.de



[zur Website
to website](#)